



**KIDS MEDICAL**

キッズメディカル株式会社

www.kids-medical.com

## 携帯用鼓膜按摩器 IC-58

見やすい、使いやすい、簡単操作。

安心の  
ロングセラー  
製品





# 携帯用鼓膜按摩器 IC-58

商品コード：1008310

携帯用鼓膜按摩器 IC-58 は、空気の振動を両耳に伝えることで鼓膜をマッサージし、両耳に心地よい刺激が広がります。医療機関から在宅使用まで幅広い実績を持つ、安心、信頼の“Made In JAPAN”製品です。

- 利用者に優しいデザイン
- 大きな文字で見やすい操作パネル
- 操作が簡単だからすぐ使える
- 周囲も気にならない静音設計
- 自動停止機能付きだから安心

## ● 各部名称と付属品

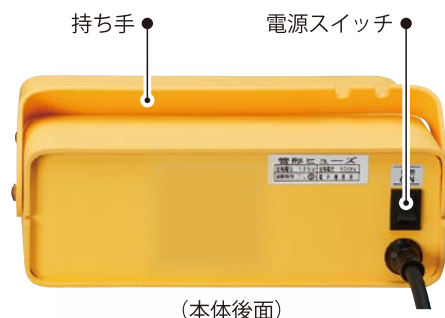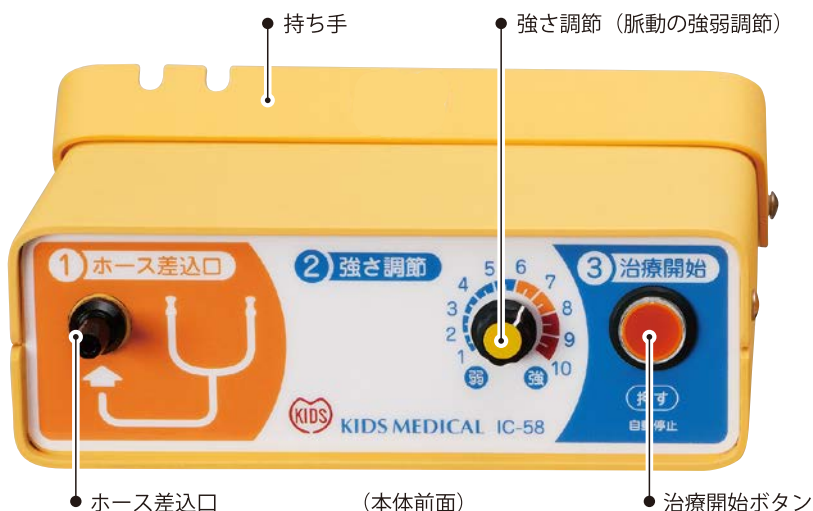

〈付属品〉  
耳掛けゴム管一式  
商品コード：1008313

## ● 使い方は簡単です

治療開始ボタンを押すだけでご使用になれます。鼓膜按摩器は3分後に自動で停止します。



### ▼耳掛けゴム管の交換用部品として別途販売

商品コード	商品名
1008307	鼓膜按摩器 耳入れ(組) 2個入
1008308	鼓膜按摩器 耳入れ先(黒ゴム) 2個入
1008311	鼓膜按摩器 耳入れ基(白) 2個入
1008312	鼓膜按摩器 ゴム管(レーベン) 75cm

## ● 技術仕様

電源	AC 100V 50/60Hz
入力	45VA
ポンプ	電磁ダイアフラム式
外装	塩化ビニール樹脂
寸法	W221×D210×H103 (mm)
重量	2.4 kg
認証番号	16000BZZ01651000

## ● 性能

脈動波の最大圧力	5 kPa
脈動波の周波数	7 Hz
タイマーの時間	3分

■管理医療機器(クラスII)、特定保守非該当

■電撃に対する保護形式・程度による装着部：クラスI機器・B形装着部  
※製品は、改良のため予告なく変更することがあります。  
※製品の色は、印刷のため若干異なる場合があります。

(2019年4月発行)



## KIDS MEDICAL

キッズメディカル株式会社

www.kids-medical.com

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-12  
tel. 03-5615-8822 fax. 03-5615-8855  
営業時間：8:00～16:30 ※土日祝を除く  
1922kids-inquiry@kids-medical.com

販売代理店