


ジャイロフレンツェル G96DA

ただ、軽い、シンプル

150g

Made in JAPAN

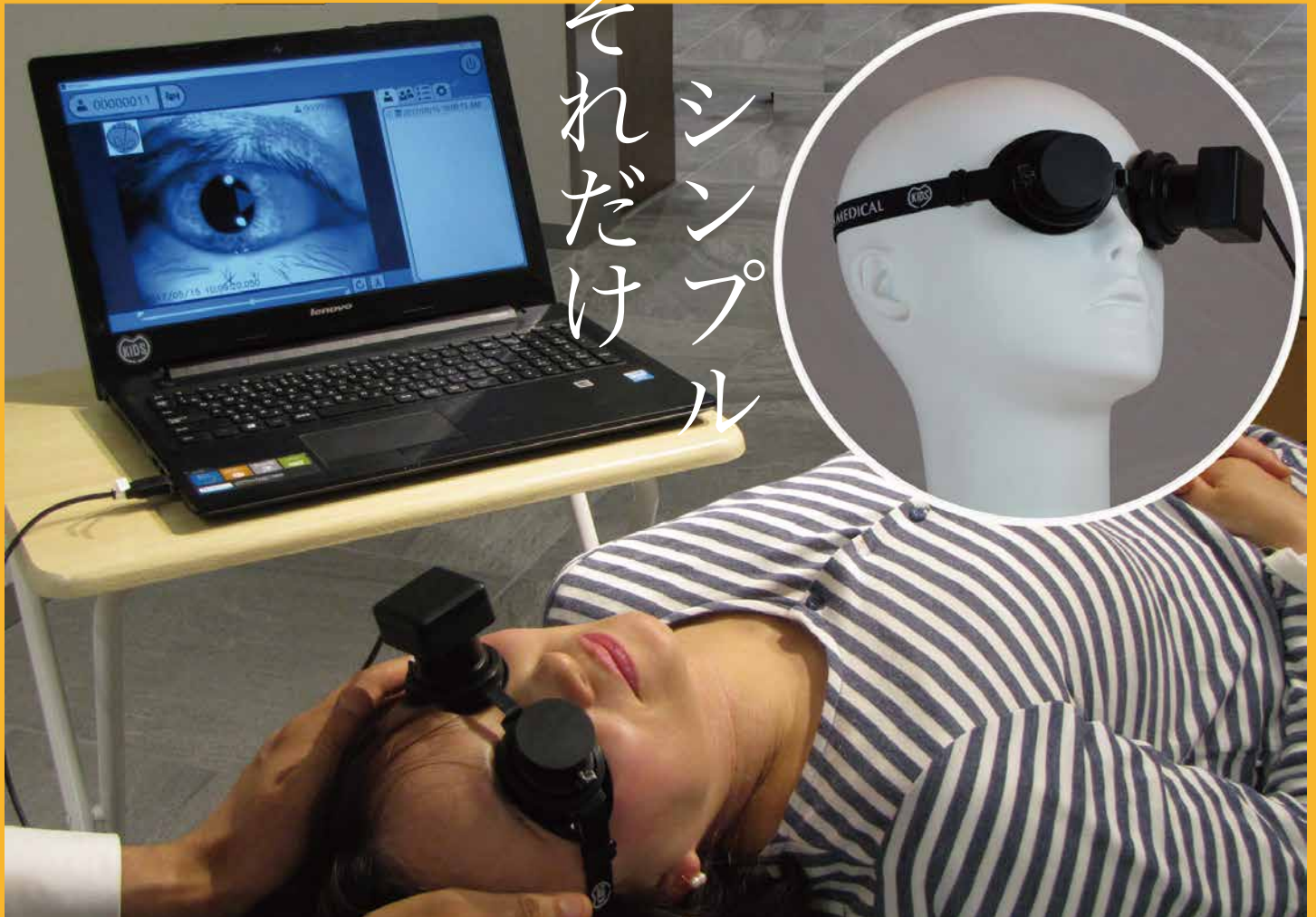

※Windows 10 標準 USB 映像入力でリアルタイム画像を表示できます。Windows10 より前のバージョン、Mac、iOS 端末、Android 端末等での画像表示は対応していません (2017 年 11 月現在)。

※パソコン用ソフトウェア (表示、記録いずれも) は付属しません。カタログ写真のソフトウェアはサンプルです。

※患者さんの頭位角度情報を画像と同時に出力しています。頭位角度情報の表示にはソフトウェアが必要です。

Supervisor

熊本県 くらだ耳鼻咽喉科医院

新潟県 株式会社ガゾウ

 **KIDS MEDICAL**
キッズメディカル株式会社

 Project Gyro with K
<http://www.gazo.co.jp/gyrofrenzel.html>

 Gazo  **KURODA**
くらだ耳鼻咽喉科医院

ジャイロフレンツェル G96DA は、暗視野内で眼球の運動を観察する装置です。

暗所の自発眼振、頭位眼振などの検査に用いられます。

- ★平衡機能検査で頭位及び頭位変換眼振検査を行う時に使用します
- ★シリコン製フェイスパッドを使用しアルコールで簡単に清拭でき、オートクレーブも可能です
- ★折りたたむと手のひらサイズにコンパクトにまとまります

製品コード 1004001

販売名 ジャイロフレンツェル G96DA

届出番号 13B2X1026717E001



交換用部品として別途販売


商品コード	商品名
1008001	目当てゴム (2個)
1008002	ノーズピース
1008004	キャップ (ゴーグル用)
1008005	ゴムバンド
1008006	エイト環 (2個)
1008009	USB ケーブル (3m)

技術仕様

項目	仕様
眼鏡動作検出	暗所 TV カメラ撮影方式
照明方式	赤外線 LED 照明方式
観察方式	パーソナルコンピュータで表示
眼鏡固定方式	ゴムベルト固定式
定格電圧	DC 4.45V ~ 5.25V
定格電流	0.9A
クラス分類	クラス I 一般医療機器
重量	150g

映像イメージ

顔のイラストにより頭位方向が分かり易いように顔イラスト付き

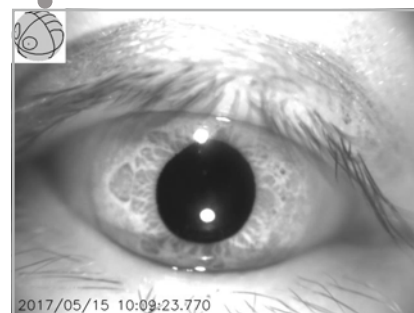

※Windows 10 標準 USB 映像入力でリアルタイム画像を表示できます。Windows 10 より前のバージョン、Mac、iOS 端末、Android 端末等での画像表示は対応していません (2017 年 11 月現在)。

※パソコン用ソフトウェア (表示、記録いずれも) は付属しません。カタログ写真のソフトウェアはサンプルです。※患者さんの頭位角度情報を画像と同時に出力しています。頭位角度情報の表示にはソフトウェアが必要です。



〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-12

営業時間 8:00~16:30 (土日祝祭日を除く)

TEL 03-5615-8822

FAX 03-5615-8855

MAIL 1922kids-inquiry@kids-medical.com

URL www.kids-medical.com



改良のため、製品のデザイン、仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。製品の色は印刷物を实物では若干異なります。