

# SUCTION BOX

≡ SB230 ≡



- 医院内を静かな環境に保てます
- 吸引排気エアーも室外のため安心です

# SUCTION BOX

≡ SB230 ≡

商品コード 1001150  
販売名 SUCTION BOX SB230



## 基本仕様


品名	SUCTION BOX SB230
本体寸法	W750×D500×H970mm
重量	65kg
蓄圧タンク	28L
ポンプ	ダイヤフラム式400W
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	6A

## 性能

MANUAL最高吸引圧	-88kPa
AUTO吸引圧	-60~-80kPa
排気流量	120L/min

## 交換用部品として別途販売

商品コード	付属構成品
1001823-10	ポリプロピレン青フィルター 10φ穴
1001852-1	スポンジ(黒)200×300×20
1001934-1	シリコン管 内径10mm・外径20mm(1m)
1009033	保温電球

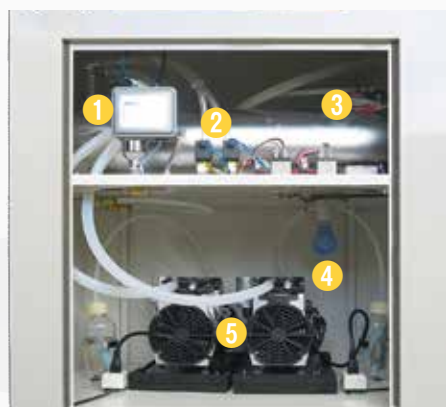

## 外部名称

- 1 吸引圧スイッチ
- 2 モーターバルブ
- 3 陰圧タンク
- 4 保温電球
- 5 吸引モーター

## 仕様

- AUTO・MANUAL切り替えスイッチ
  - ・AUTOに入れると、常にタンク内の陰圧が-60~-80kPaになるように自動的に吸引モーターが作動します。
  - ・MANUALに入れると、吸引モーターは連続作動します。
- 吸引モーターの保温電球
  - ・吸引モーターが低温による起動不良を起こす場合がありますので、本機体内の温度が20℃以下になるとSUCTION BOX下段にある保温電球100Wが点灯します。