



SPIKAL SDI30Air

基本仕様

品名	SPIKAL SD130Air		
基本寸法	W485 × D340 × H825mm		
重量	約 41.5kg		
本体材質	ボディ(スチール・メラミン焼付塗装)		
吸引装置	ピストン式(オイルフリー)吸引ポンプ1台 綿巻シリコン管[オートスイッチ]1本 吸引瓶 ガラス直型瓶 2000ml 1本 ※ディスプレイはオプション別売品		
スプレー装置	ダイヤフラム式陽圧ポンプ1台 綿巻シリコン管[オートスイッチ]2本(太1本・曲1本)		
深型トレイ	2個 W140 × D210 × H72mm(内寸)		
引出し	2段 W116 × D235 × H90mm(内寸)		
電源電圧	AC100V, 50/60Hz		
電源入力	360VA		
電撃に対する保護の形式・程度により分類	クラスⅠ機器・B形機器		

性能

吸引圧	-90kPa以上	スプレー圧	0.1MPa
吸引流量(吸引口)	50L/min以上	コンプレッサーの排気流量	15.5L/min
ポンプの排気速度	85L/min以上		

販売名 吸引器 SPIKAL SD130Air
 認証番号 229ALBZX00029000
 クラス分類 管理医療機器(クラスⅡ)
 JMDNコード 36616030, 70451000

【標準タイプ】

商品コード 1001126-1
 【ディスプレイタイプ】
 商品コード 1001126-2
 プラスチック製吸引ボトル(リユーズابل)とディスプレイ用吸引バッグのセットで使用します。

各部名称と付属品 ※写真は標準タイプです



- 1 トレイカバー
- 2 深型トレイ
- 3 綿棒缶
- 4 スプレー+スプレーホルダー
- 5 吸引アダプタ
- 6 吸引瓶(検口瓶100ml)
- 7 排気瓶(検口瓶100ml)
- 8 安全弁用瓶
- 9 電源スイッチ
- 10 引き出し
- 11 吸引瓶格納扉
- 12 吸引瓶(直型瓶2000ml)
- 13 吸引圧調整器
- 14 スプレー圧調整器
- 15 吸引圧メーター
- 16 スプレー圧メーター

交換用部品として別途販売

商品コード	吸引瓶セット(標準タイプ用)
1007311	直型瓶2000ml
1007411	直型瓶キャップ式
1007431	握げ手直型瓶用

商品コード	吸引瓶セット
1007303-1	検口瓶100ml(無地)
1007420-2	クリームキャップ式白綿フィルター付
商品コード	排気瓶セット
1007303-1	検口瓶100ml(無地)
1007419-7	クリームキャップ式 ゴム口NO.8 1個付
1001802-98	綿棒缶 46φ長 H:95mm
1001875	深型トレイ W155×D220×H73mm

商品コード	スプレー関係商品
1002150-1	耳鼻科ユニット用直結スプレー式(太)
1002150-2	耳鼻科ユニット用直結スプレー式(細)
1002150-3	耳鼻科ユニット用直結スプレー式(曲)
1002156-1	耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶(透明)
1002156-2	耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶(茶色)
1002155	スプレー電

オプション別売品

※本吸引器本体には標準で付属しておりませんので、初めてお使いになる場合はご確認ください。


商品コード	フットスイッチON-OFF切替型 N-240R
1009012	セレスディスプレイ用吸引バッグ2000ml(24個/箱)
1009014	セレス吸引キャニスタ 2000mlL字型コネクター付
1009018	セレス凝固剤スティックタイプ25g(24個入)

便利なマグネット式の収納小物を販売しています。(オプション別売品)



SPIKAL SDI30Air

Mobile
 All in one
 Compact
 Simple
 Japan made

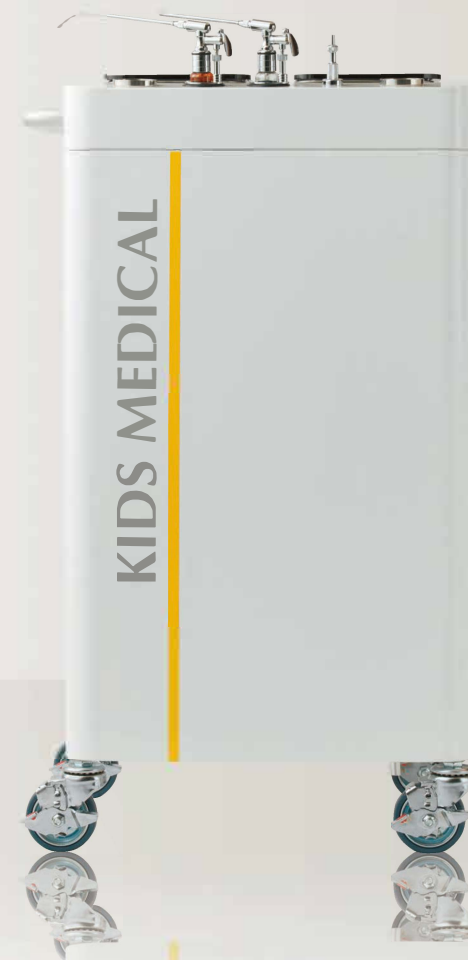

製造販売業

KIDS MEDICAL
 キッズメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-12 TEL 03-5615-8822 FAX 03-5615-8855
 Mail 1922kids-inquiry@kids-medical.com
 URL www.kids-medical.com

KIDS MEDICAL
 キッズメディカル株式会社

「吸引」と「スプレー」、2つの機能を 1台のワークステーションにしました。

医療者の理想と患者さまへの思いやりから生まれました。
医療現場のリアルな声を開発起点に。ユーザー視点で
現場観察・インタビューを丁寧に行い、
職人の技術力を集結して製品化を実現しました。

Mobile

どこでも、どこへでも

- +幅広い医療汎用として外来診察室はもちろん様々な診療科での使用が可能です。
- +ベッドサイドなど、ダイレクトに患者さまの元へ駆けつけての診療が可能です。患者さま、医療者の移動負担や院内感染リスクを軽減し、より自然な形で診療を享受・提供できます。
- +安全走行への配慮から、移動や診療の障害となるむき出しのホースやコード類を全て内蔵しました。また本体上部の診療用深型トレイには蓋を設置し、清潔感の維持、静音性に配慮した設計です。

Simple

凹凸の少ないフラットでシンプルなデザイン

- +吸引・スプレーをオートスイッチにし、ワンアクションで使用できます。
- +本体全面をほぼフラットにすることにより、お手入れが簡単になり清潔に保てます。
- +吸引瓶を本体に内蔵することにより、直接排液が見えることがなく不快感を与えません。一方、吸引瓶が内蔵された扉にはスモーク窓を設置し、排液がどれだけ溜まっているか一目で分かる仕様です。



Compact

小型で小回りの利くサイズ
(W485mm×D340mm×H825mm)を実現

- +コンパクトな設置型ユニットと比較し約52%小型化を実現しました（当社従来製品との容積比較）。
- +設置の自由度が高く、狭小スペースでも設置が可能なため、作業動線が短くなりました。また立っても座っても好みのスタイルで診療できます。
- +宅急便での送付が可能なサイズで納品、設置、移動、修理の際の手間を軽減します。



All in one

診療に必要な機能と装備を集約

- +高性能の吸引機能（最大吸引圧-90kPa、吸引流量50L/min以上、ポンプの排気速度85L/min以上）とスプレー機能（スプレー圧力0.1MPa、コンプレッサーの排気流量15.5L/min）を搭載しました。
- +本体上部の診療用深型トレイ部分を2面に分割。診療や収納スペースとしてだけでなく、使用前（清潔）と使用后（不潔）領域に分けて利用するなど衛生面に配慮した使い方ができます。
- +現場に必要な小物類を想定し、使い勝手の良い2段の引き出しや綿棒缶を作りつけました。またスチール製の本体にマグネットタイプの収納を付加することで大容量の装備が携帯可能です。



Japan made

1922年創業のKIDS (Kawanishi Iryo Denki Seisakusho) の技術とブランドを継承

- +医療用吸引器を長年専門に製造してきたメーカーとしての安心と信頼。
- +熟練職人によるハンドメイド。
- +企画設計から製造出荷、メンテナンス、修理まで全てALL JAPANでワンストップ生産します。

Color variations

カラーバリエーション(イエロー以外はオプションです)
病院内の空間に合わせた配色を取り揃えています。



サンイエロー ライトブルー ライトピンク ライトグリーン