



販売名 吸引器 SPIKAL SD130Air
認証番号 229ALBZX00029000
クラス分類 管理医療機器(クラスⅡ)
JMDNコード 36616030, 70451000

【標準タイプ】
商品コード 1001126-1
【ディスプレイタイプ】
商品コード 1001126-2
プラスチック製吸引ボトル(リユーズابل)と
ディスプレイザブル吸引バッグのセットで使用する
タイプです。

各部名称と付属品

※写真は標準タイプです



- 1 トレイカバー
- 2 深型トレイ
- 3 綿棒缶
- 4 スプレー+スプレー 筆
- 5 吸引アダプタ
- 6 吸引瓶(掬口瓶100ml)
- 7 電源スイッチ
- 8 引き出し
- 9 吸引瓶格納扉
- 10 吸引瓶(直型瓶2000ml)
- 11 吸引圧調整器
- 12 スプレー圧調整器
- 13 吸引圧メーター
- 14 スプレー圧メーター
- 15 中空糸膜フィルター
- 16 排気瓶(掬口瓶400ml)
- 17

交換用部品として別途販売

商品コード	吸引瓶セット
1007303-1	掬口瓶100ml
1007311	直型瓶2000ml
1007411	直型瓶キャップ式
1007431	提げ手直型瓶用
商品コード	排気瓶セット
1007316	掬口瓶400ml
1007419-7	クリームキャップ式 ゴム口No.8 1個付
1009035	中空糸膜フィルターセットIRF11-N1RC
1001802-98	綿棒缶 46φ長 H:95mm
1001875	深型トレイW155×D220×H73mm

オプション別売品

※本吸引器本体には標準で付属しておりませんので、初めてお使いになる場合はご注意ください。

1009012-1	セレス吸引バッグ 2000ml-F(24個/箱)
1009014	セレス吸引用キャニスタ 2000ml L字コネクター付
1009018	セレス凝固剤スティックタイプ25g(24個入)

ディスプレイザブルタイプの吸引Ⅱにも対応しています。(オプション別売品)



SPIKAL SDI30Air

基本仕様

品名	SPIKAL SD130Air
基本寸法	W485 × D340 × H825mm
重量	約41.5kg
本体材質	ボディ(スチール・メラミン焼付塗装)
吸引装置	ピストン式(オイルフリー)吸引ポンプ1台 綿巻シリコン管[オートスイッチ] 1本 吸引瓶 ガラス 直型瓶2000ml 1本 ※ディスプレイタイプはオプション別売品
スプレー装置	ダイヤフラム式陽圧ポンプ1台 綿巻シリコン管 [オートスイッチ]直太2本
深型トレイ	2個 W140 × D210 × H72mm(内寸)
引出し	2個 W116 × D235 × H90mm(内寸)
電源電圧	AC100V, 50/60Hz
電源入力	360VA
電撃に対する保護の 形式・程度により分類	クラスⅠ機器・B形機器

性能

吸引圧	-90kPa以上	スプレー圧	0.1MPa
吸引流量(吸引口)	50L/min以上	コンプレッサーの排気流量	15.5L/min
ポンプの排気速度	85L/min以上		

SPIKAL SDI30Air

Mobile
All in one
Compact
Simple
Japan made



製造販売業



〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-12 TEL 03-5615-8822 FAX 03-5615-8855
Mail 1922 kids-inquiry@kids-medical.com
URL www.kids-medical.com



Webサイト



YouTube ch

製品は改良のため若干変更することがあります。製品の色は印刷のため若干異なる場合があります。

2025年4月現在





製品紹介ページは
こちらから

「吸引」と「スプレー」、2つの機能を 1台のワークステーションにしました



製品紹介動画は
こちらから

医療者の理想と患者さまへの思いやりから生まれました。
医療現場のリアルな声を開発始点に。ユーザー視点で
現場観察・インタビューを丁寧に行い、
職人の技術力を集結して製品化を実現しました。

Mobile

どこでも、どこへでも


- +幅広い医療汎用として外来診療室はもちろん
様々な診療科での使用が可能です。
- +ベッドサイドなど、ダイレクトに患者さまの元
へ駆けつけての診療が可能です。患者さま、医療者の
移動負担や院内感染リスクを軽減し、より自然な
形で診療を享受・提供できます。
- +安全走行への配慮から、移動や診療の障害となる
むき出しのホースやコード類を全て内蔵しました。
また本体上部の診療用深型トレイには蓋を設置
し、清潔感の維持、静音性に配慮した設計です。



Compact

小型で小回りの利くサイズ
(W485mm×D340mm×H825mm)を実現

- +コンパクトな設置型ユニットと比較し約52%小型化を
実現しました（当社従来製品との容積比較）。
- +設置の自由度が高く、狭小スペースでも設置が可能のため、
作業動線が短くなりました。また立っても座ってもお好
みのスタイルで診療できます。
- +宅急便での送付が可能なサイズで納
品、設置、移動、修理の際の手間を
軽減します。

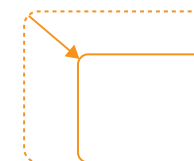

All in one

診療に必要な機能と装備を集約



吸引カテストの
動画はこちらから

- +高性能の吸引機能（最大吸引圧-90kPa、吸引流量
50L/min以上、ポンプの排気速度85L/min以上）と
スプレー機能（スプレー圧力0.1MPa、コンプレッサー
の排気流量15.5L/min）を搭載しました。
- +本体上部の診療用深型トレイ部分を2面に分割。診療や
収納スペースとしてだけでなく、使用前（清潔）と使用
後（不潔）領域に分けて利用するなど衛生面に配慮した
使い方ができます。
- +現場に必要な小物類を想定し、使い勝手の良い2段の引
き出しや綿棒缶を作りつけました。またスチール製の本
体にマグネットタイプの収納を付加することで大容量の
装備が携帯可能です。



Simple

凹凸の少ないフラットでシンプルなデザイン

- +吸引・スプレーをオートスイッチにし、ワンアクションで使用
できます。
- +本体全面をほぼフラットにすることにより、お手入れが簡
単になり清潔に保てます。
- +吸引瓶を本体に内蔵することにより、直接排液が見えるこ
とがなく不快感を与えません。一方、吸引瓶が内蔵された
扉にはスモーク窓を設置し、排液がどれだけ溜まっている
か一目で分かる仕様です。



Japan made

1922年創業のKIDS(Kawanishi Iryo Denki
Seisakusho) の技術とブランドを継承

- +医療用吸引器を長年専門に製造してきたメーカーとしての
安心と信頼。
- +熟練職人によるハンドメイド。
- +企画設計から製造出荷、メンテナンス、修理まで全て
ALL JAPANでワンストップ生産します。

Color variations

カラーバリエーション(イエロー以外はオプションです)
病院内の空間に合わせた配色を取り揃えています。



サンイエロー ライトブルー ライトピンク ライトグリーン